

Gebrauchsanweisung

 **WOUND CARE**



Inhaltsverzeichnis

Indikationen	2
Anwendungshinweise	2
Anwendung der WIMBA Wound Care Sticks	4
Standardreinigung	4
Lagerbedingungen	5
Anwendungstemperaturen	5
Wichtige Einschränkungen und Warnhinweise	5

Indikationen

WIMBA Wound Care bietet eine Lösung in Form einer atmungsaktiven, flexiblen Barriere. Durch den physischen Abstand zwischen der Wunde und der Umgebung schützen die Produkte die betroffene Stelle vor direktem äußeren Kontakt und absorbieren und verteilen zugleich den Druck auf eine größere Fläche, wenn eine Kraft einwirkt. Wird dieser Abstandhalter über einer primären Wundauflage angebracht, verbessert er die Thermoregulation, was die Heilungsdauer direkt beeinflusst, insbesondere bei Infektionen, Exsudat und Eiterbildung.


Anwendungsbeispiele:

- Wunden
- Schwielen
- wund Stellen
- über knöchernen Vorsprüngen zur Verringerung des Risikos von Druckgeschwüren

Anwendungshinweise

Richtige Größe auswählen:

Wählen Sie eine Produktgröße, die die Wunde oder den betroffenen Bereich vollständig umschließt. Das Produkt sollte vollständig auf dem umliegenden gesunden Gewebe aufliegen, um die betroffene Stelle wirksam vom Druck zu entlasten.

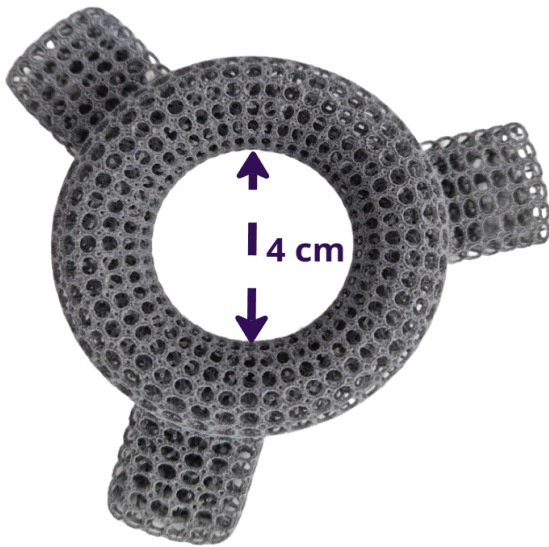

Wundbereich vorbereiten:

Befolgen Sie die üblichen veterinärmedizinischen Protokolle zur Wundreinigung. Bringen Sie bei jeder offenen Wunde, jedem Ulkus oder jeder Operationsstelle zunächst eine geeignete primäre Wundauflage (z. B. eine sterile, nicht haftende Wundauflage oder Gaze) direkt auf dem Wundbett an.


Produkt positionieren:

Legen Sie das Produkt über den vorbereiteten Bereich und stellen Sie sicher, dass die Wunde und die primäre Wundauflage genau mittig in der Öffnung des Produkts liegen. Das Produkt selbst darf nicht direkt mit der offenen Wunde in Kontakt kommen.

Bitte beachten!

Das Produkt selbst darf nicht direkt mit der offenen Wunde in Kontakt kommen.

Anwendung der WIMBA Wound Care Sticks

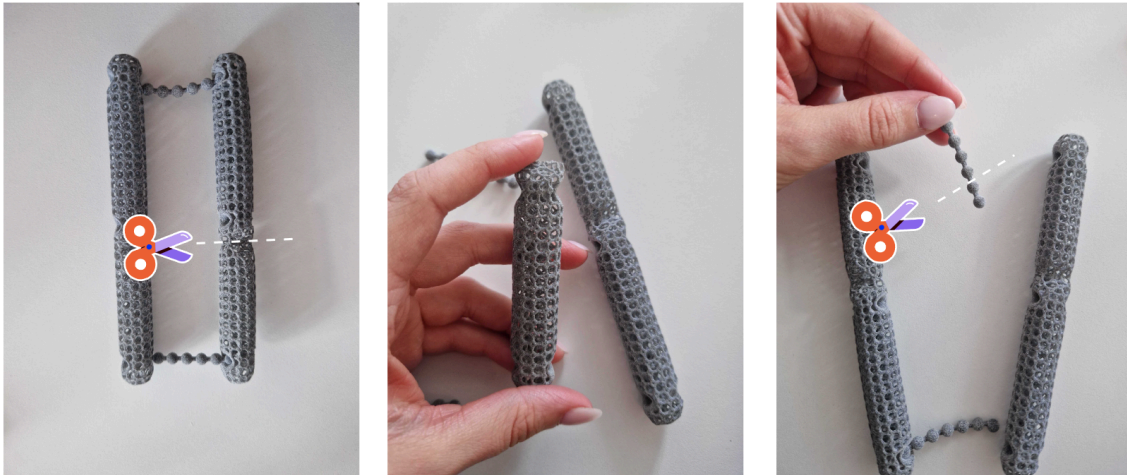

1. Die Hauptelemente können an der schmalsten Stelle zugeschnitten werden.
2. Die Verbindungsschnur ist ein separates Element und kann bei schmalen Wunden gekürzt werden.

Standardreinigung

- Das Produkt kann von Hand mit lauwarmem Wasser und einer chirurgischen Seife oder einer milden, pH-neutralen Seife gereinigt werden.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um die Oberfläche vorsichtig zu reinigen, und vermeiden Sie scheuernde Materialien.
- Spülen Sie das Produkt gründlich mit sauberem Wasser ab, um alle Seifenreste zu entfernen.
- Lassen Sie das Produkt vor der Lagerung oder Wiederverwendung in einem gut belüfteten Bereich vollständig an der Luft trocknen.

Bitte beachten!

Aus hygienischen Gründen darf das Produkt bei einem einzigen Patienten bis zu 5-mal verwendet werden. Reinigen Sie das Produkt zwischen jeder Anwendung.

Lagerbedingungen

- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.
- Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass das Produkt vollständig sauber und trocken ist, um mikrobielles Wachstum zu verhindern.

Anwendungstemperaturen

- Um die optimale Funktion des Produkts sicherzustellen, wird die Verwendung in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F) empfohlen.
- Eine längere Einwirkung von Temperaturen außerhalb dieses Bereichs kann die Leistung und strukturelle Integrität des Produkts beeinträchtigen.

Wichtige Einschränkungen und Warnhinweise

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu einer Beschädigung des Produkts, einem Versagen des Produkts oder einer Schädigung des Patienten führen.

-  **VORSICHT:** Chemische Empfindlichkeit. Setzen Sie dieses Produkt keinen aggressiven oder korrosiven Chemikalien aus. Dazu gehören unter anderem Lösungsmittel (z. B. Aceton), starke Säuren, Laugen und scheuernde Reinigungsmittel. Die Verwendung solcher Mittel kann die strukturelle Integrität des Produkts beeinträchtigen und zu einer Zersetzung des Materials führen.

-  **VORSICHT: Temperaturempfindlichkeit.** Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 122 °F (50 °C) aus. Hohe Temperaturen können zu einer dauerhaften Verformung führen und Form sowie Leistung des Produkts verändern.
 - DIESES PRODUKT NICHT AUTOKLAVIEREN.
 - Verwenden Sie weder Dampf noch hitzebasierte Sterilisationsverfahren oder einen Geschirrspüler.



VOR GEBRAUCH LESEN:

1. Dieses Produkt ist zur Verwendung durch einen zugelassenen Tierarzt oder auf dessen Anordnung bestimmt. Befolgen Sie stets die bereitgestellte Gebrauchsanweisung sowie alle festgelegten klinischen Protokolle für die Wundversorgung.
2. Nur zur äußerlichen Anwendung. Es darf nicht innerlich angewendet, implantiert oder in eine Körperhöhle bzw. eine tiefe Operationsstelle eingebracht werden. Der Abstandhalter ist nicht für den direkten Kontakt mit einer offenen Wunde bestimmt. Um Kontaminationen, Reizungen oder eine Beeinträchtigung des Heilungsprozesses zu vermeiden, darf der Abstandhalter nicht direkt mit dem offenen Wundbett in Kontakt kommen.
3. Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn an oder in der Nähe der Anwendungsstelle Anzeichen von Hautreizung, allergischer Reaktion, Infektion oder andere unerwünschte Wirkungen auftreten.
4. Die Stabilität und korrekte Positionierung dieses Produkts hängen entscheidend von einer korrekten und sicheren Verbandtechnik ab. Insbesondere unter dem Gewicht des Tieres oder infolge von Bewegungen des Patienten kann sich das Produkt verschieben oder

verlagern; dies gilt nicht als Produktmangel. Die anwendende Person ist allein dafür verantwortlich, dass das Produkt ordnungsgemäß gesichert ist. Kontrollieren Sie Verband und Wundbereich regelmäßig, um sicherzustellen, dass das Produkt in der vorgesehenen Position verbleibt.

5. Obwohl dieses Produkt zur Unterstützung der Wundversorgung entwickelt wurde, übernimmt WIMBA weder ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistungen hinsichtlich der Heilung oder des endgültigen Ergebnisses einer Wunde. Der Behandlungserfolg hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die ordnungsgemäße Anwendung, der Gesundheitszustand des Patienten und eine umfassende tierärztliche Versorgung.
6. Kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
7. Achten Sie darauf, dass Erwachsene, Kinder oder Tiere dieses Produkt nicht verschlucken. Suchen Sie bei versehentlichem Verschlucken sofort medizinische bzw. tierärztliche Hilfe auf.



Folgen Sie uns in den sozialen Medien:

- [instagram.com/wimba.vet](https://www.instagram.com/wimba.vet)
- [facebook.com/wimba.vet](https://www.facebook.com/wimba.vet)
- [linkedin.com/wimbavet](https://www.linkedin.com/company/wimbavet)
- [youtube/@wimba.vet](https://www.youtube.com/channel/UCwimba.vet)

Treten Sie unserer Facebook-Gruppe bei:

- [facebook.com/groups/wimbapets](https://www.facebook.com/groups/wimbapets)