

Manual de usuario



Índice

Indicaciones	2
Guía de aplicación	2
Uso de WIMBA Wound Care Sticks	4
Limpieza estándar	4
Condiciones de almacenamiento	5
Temperaturas de uso	5
Limitaciones y advertencias importantes	5

Indicaciones

WIMBA Wound Care ofrece una solución mediante una barrera transpirable y flexible. Al crear una separación física entre la herida y el entorno, los dispositivos protegen la zona frente al contacto externo directo, al tiempo que absorben y distribuyen la presión sobre una superficie mayor cuando se aplica una fuerza. Cuando se coloca sobre un apósito primario, este separador mejora la termorregulación, lo que influye directamente en el tiempo de cicatrización, especialmente en casos de infección, exudado y supuración.


Ejemplos de uso:

- heridas
- callosidades
- llagas
- sobre prominencias óseas para reducir el riesgo de úlceras por presión

Guía de aplicación

Seleccione el tamaño correcto:

Elija un tamaño de producto que rodee por completo la herida o la zona afectada. El dispositivo debe apoyarse íntegramente sobre el tejido sano circundante para descargar de forma eficaz la presión de la zona.

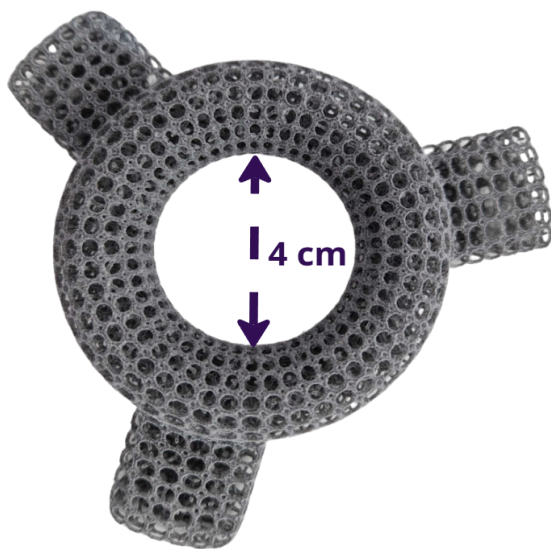

Prepare la zona de la herida:

Siga los protocolos veterinarios habituales para la limpieza de heridas. En cualquier herida abierta, úlcera o zona quirúrgica, aplique primero un apósito primario adecuado (p. ej., un apósito estéril no adherente o una gasa) directamente sobre el lecho de la herida.


Coloque el producto:

Coloque el producto sobre la zona preparada y asegúrese de que la herida y su apósito primario queden perfectamente centrados dentro de la abertura del producto. El producto no debe entrar en contacto directo con la herida abierta.

¡Recuerde!

El producto no debe entrar en contacto directo con la herida abierta.

Uso de WIMBA Wound Care Sticks

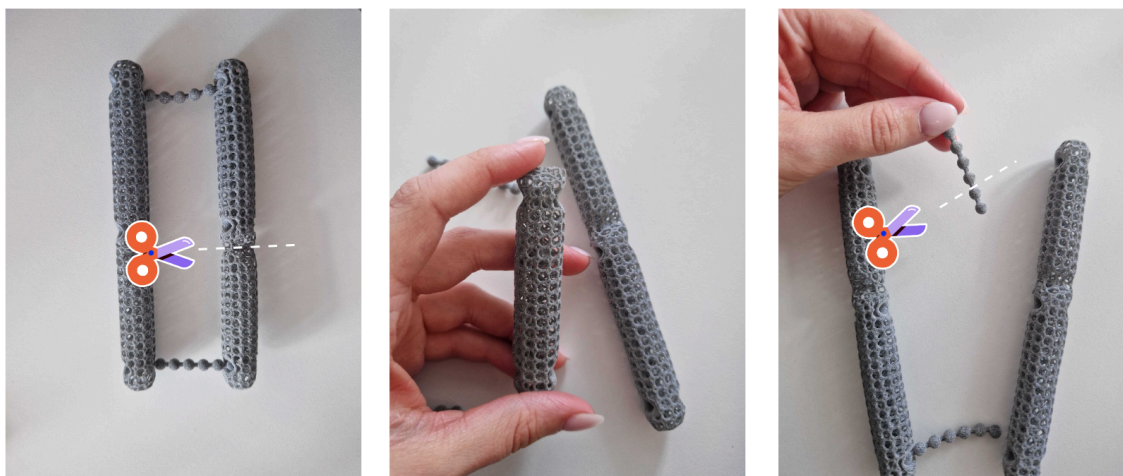

1. Los elementos principales pueden recortarse por el punto más estrecho.
2. El cordón de conexión es un elemento independiente y puede acortarse para heridas más estrechas.

Limpieza estándar

- El producto puede limpiarse manualmente con agua templada y jabón quirúrgico o un jabón suave de pH neutro.
- Utilice un paño suave o una esponja para limpiar con cuidado la superficie, evitando los materiales abrasivos.
- Aclare bien con agua limpia para eliminar todos los restos de jabón.
- Deje que el producto se seque por completo al aire en una zona bien ventilada antes de guardarlo o volver a utilizarlo.

¡Recuerde!

Por motivos de higiene, el producto puede utilizarse hasta 5 veces en un mismo paciente. Lave el producto entre aplicaciones.

Condiciones de almacenamiento

- Guarde el producto en un lugar fresco y seco.
- Protéjalo de la luz solar directa y de la humedad.
- Antes de guardarlo, asegúrese de que el producto esté completamente limpio y seco para evitar el crecimiento microbiano.

Temperaturas de uso

- Para garantizar el funcionamiento óptimo del producto, se recomienda utilizarlo dentro de un intervalo de temperatura de 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F).
- La exposición prolongada a temperaturas fuera de este intervalo puede afectar negativamente al rendimiento y a la integridad estructural del producto.

Limitaciones y advertencias importantes

El incumplimiento de estas advertencias puede provocar daños en el producto, fallos del dispositivo o lesiones al paciente.

-  **PRECAUCIÓN:** Sensibilidad química. No exponga este producto a sustancias químicas agresivas o corrosivas. Esto incluye, entre otros, disolventes (p. ej., acetona), ácidos fuertes, álcalis y productos de limpieza abrasivos. El uso de estos agentes puede comprometer la integridad estructural del producto y degradar el material.
-  **PRECAUCIÓN:** Sensibilidad térmica. No exponga el producto a temperaturas superiores a 122 °F (50 °C). Las altas temperaturas pueden provocar una deformación permanente y alterar la forma y el rendimiento del producto.
 - NO ESTERILICE ESTE PRODUCTO EN AUTOCLAVE.
 - No utilice vapor, métodos de esterilización por calor ni lavavajillas.



LEA ESTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO:

1. Este producto está destinado a ser utilizado por un veterinario colegiado o bajo su prescripción. Siga siempre las instrucciones de uso proporcionadas y los protocolos clínicos establecidos para el tratamiento de heridas.
2. Solo para uso externo. No debe utilizarse internamente, implantarse ni colocarse dentro de ninguna cavidad corporal o zona quirúrgica profunda. El separador no está diseñado para entrar en contacto directo con una herida abierta. Para evitar la contaminación, la irritación o la alteración del proceso de cicatrización, no permita que el separador entre en contacto directo con el lecho de la herida abierta.
3. Interrumpa de inmediato el uso si aparecen signos de irritación cutánea, reacción alérgica, infección u otros efectos adversos en la zona de aplicación o cerca de ella.
4. La estabilidad y la correcta colocación de este producto dependen de forma crítica de una técnica de vendaje correcta y segura. El producto puede moverse o desplazarse, especialmente bajo el peso del animal o debido a sus movimientos, y esto no se considera un defecto del producto. La persona que aplica el dispositivo es la única responsable de asegurarlo correctamente. Revise periódicamente el vendaje y la zona de la herida para confirmar que el producto se mantiene en la posición prevista.
5. Aunque este producto está diseñado para ayudar en el tratamiento de heridas, WIMBA no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, sobre la cicatrización o el resultado final de ninguna herida. El éxito del tratamiento depende de diversos factores, como la correcta

aplicación, el estado de salud del paciente y una atención veterinaria integral.

6. Guárdelo en un lugar fresco y seco. Evite la luz solar directa.
7. No permita que adultos, niños ni animales ingieran este producto. En caso de ingestión accidental, solicite asistencia médica o veterinaria de inmediato.



Síguenos en redes sociales:

- [instagram.com/wimba.vet](https://www.instagram.com/wimba.vet)
- [facebook.com/wimba.vet](https://www.facebook.com/wimba.vet)
- [linkedin.com/wimbavet](https://www.linkedin.com/company/wimbavet)
- [youtube/@wimba.vet](https://www.youtube.com/@wimba.vet)

Únase a nuestro grupo de Facebook:

- [facebook.com/groups/wimbapets](https://www.facebook.com/groups/wimbapets)