

Manuel d'utilisation



Table des matières

Indications	2
Guide d'application	2
Utilisation des WIMBA Wound Care Sticks	4
Nettoyage standard	4
Conditions de stockage	5
Températures d'utilisation	5
Limites importantes et avertissements	5

Indications

WIMBA Wound Care offre une solution sous la forme d'une barrière respirante et flexible. En créant une distance physique entre la plaie et son environnement, les dispositifs protègent la zone de tout contact extérieur direct, tout en absorbant et en répartissant la pression sur une surface plus large lorsqu'une force est exercée. Lorsqu'il est placé sur un pansement primaire, cet espaceur améliore la thermorégulation, ce qui influe directement sur le temps de cicatrisation, notamment en présence d'une infection, d'exsudat ou de suppuration.


Exemples d'utilisation :

- plaies
- callosités
- lésions
- sur les saillies osseuses afin de réduire le risque d'escarres

Guide d'application

Choisir la taille appropriée :

Choisissez une taille qui entoure complètement la plaie ou la zone affectée. Le dispositif doit reposer entièrement sur les tissus sains environnants afin de décharger efficacement la pression exercée sur la zone.

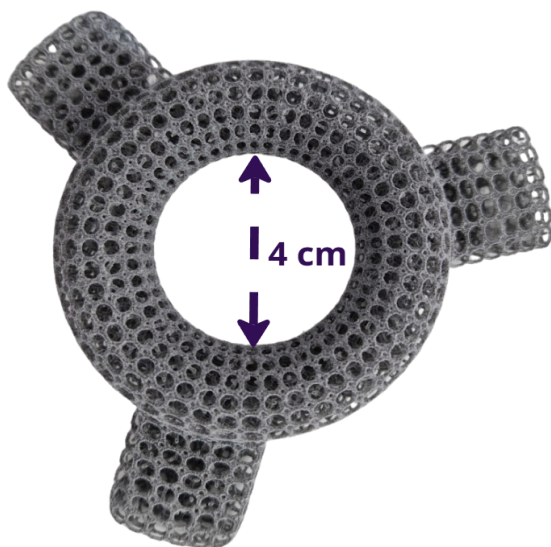

Préparer le site de la plaie :

Respectez les protocoles vétérinaires habituels de nettoyage des plaies. Pour toute plaie ouverte, tout ulcère ou tout site chirurgical, appliquez d'abord un pansement primaire approprié (p. ex. une compresse stérile non adhérente ou de la gaze) directement sur le lit de la plaie.


Positionner le produit :

Placez le dispositif sur la zone préparée en veillant à ce que la plaie et son pansement primaire soient parfaitement centrés dans l'ouverture du produit. Le dispositif lui-même ne doit pas entrer en contact direct avec la plaie ouverte.

À retenir !

Le dispositif lui-même ne doit pas entrer en contact direct avec la plaie ouverte.

Utilisation des WIMBA Wound Care Sticks

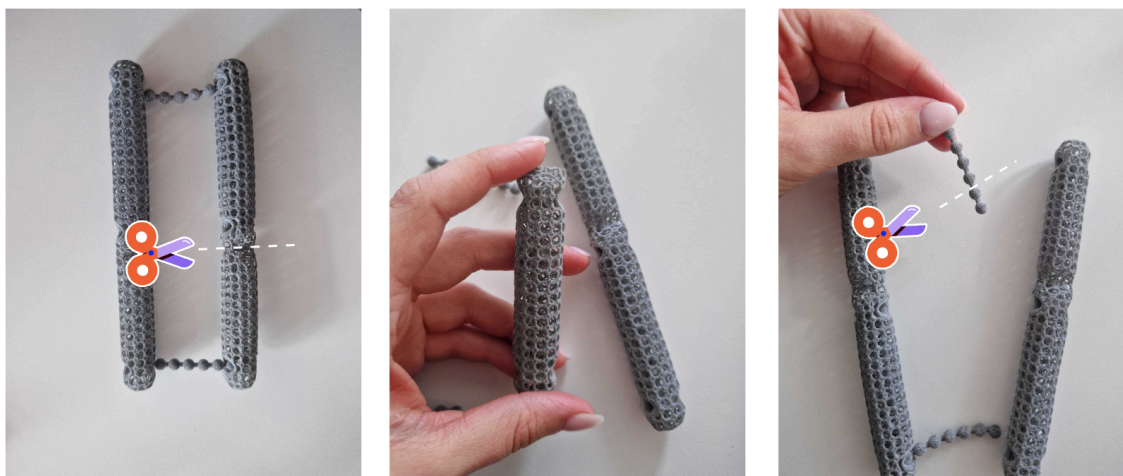

1. Les éléments principaux peuvent être découpés au niveau de leur partie la plus étroite.
2. Le cordon de raccordement est un élément distinct et peut être raccourci pour les plaies plus étroites.

Nettoyage standard

- Le produit peut être nettoyé manuellement à l'eau tiède avec un savon chirurgical ou un savon doux au pH neutre.
- Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer délicatement la surface, sans utiliser de matériaux abrasifs.
- Rincez soigneusement à l'eau claire afin d'éliminer tout résidu de savon.
- Laissez le produit sécher complètement à l'air libre dans un endroit bien ventilé avant de le ranger ou de le réutiliser.

À retenir !

Pour des raisons d'hygiène, le produit peut être utilisé jusqu'à 5 fois sur un même patient. Lavez le produit entre chaque application.

Conditions de stockage

- Conservez le produit dans un endroit frais et sec.
- Protégez-le de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Avant de le ranger, assurez-vous que le produit est parfaitement propre et sec afin d'éviter toute prolifération microbienne.

Températures d'utilisation

- Pour assurer un fonctionnement optimal du produit, il est recommandé de l'utiliser à une température comprise entre 5 °C et 40 °C (41 °F à 104 °F).
- Une exposition prolongée à des températures situées en dehors de cette plage peut altérer les performances et l'intégrité structurelle du produit.

Limites importantes et avertissements

Le non-respect de ces avertissements peut endommager le produit, entraîner une défaillance du dispositif ou blesser le patient.

-  **ATTENTION** : Sensibilité aux produits chimiques. N'exposez pas ce produit à des substances chimiques agressives ou corrosives. Cela inclut notamment les solvants (p. ex. l'acétone), les acides forts, les produits alcalins et les nettoyants abrasifs. L'utilisation de ces agents peut compromettre l'intégrité structurelle du produit et entraîner une dégradation du matériau.
-  **ATTENTION** : Sensibilité à la chaleur. N'exposez pas le produit à des températures supérieures à 122 °F (50 °C). Des températures élevées peuvent provoquer une déformation permanente et modifier la forme et les performances du produit.
 - NE PAS STÉRILISER CE PRODUIT À L'AUTOCLAVE.
 - N'utilisez ni vapeur, ni procédé de stérilisation à chaud, ni lave-vaisselle.



À LIRE AVANT UTILISATION :

1. Ce produit est destiné à être utilisé par un vétérinaire habilité ou sur son ordonnance. Respectez toujours les instructions d'utilisation fournies ainsi que les protocoles cliniques établis pour la prise en charge des plaies.
2. Usage externe uniquement. Le produit ne doit pas être utilisé en interne, implanté, ni placé dans une cavité corporelle ou un site chirurgical profond. L'espaceur n'est pas conçu pour être en contact direct avec une plaie ouverte. Afin d'éviter toute contamination, irritation ou perturbation du processus de cicatrisation, ne laissez pas l'espaceur entrer en contact direct avec le lit de la plaie ouverte.
3. Cessez immédiatement l'utilisation si des signes d'irritation cutanée, de réaction allergique, d'infection ou d'autres effets indésirables apparaissent sur le site d'application ou à proximité.
4. La stabilité et le bon positionnement de ce produit dépendent essentiellement d'une technique de bandage correcte et sûre. Le produit peut se déplacer, en particulier sous le poids de l'animal ou du fait de ses mouvements, et ce déplacement ne constitue pas un défaut du produit. La personne qui applique le dispositif est seule responsable de sa fixation appropriée. Contrôlez régulièrement le pansement et le site de la plaie afin de vérifier que le produit reste dans la position prévue.
5. Bien que ce produit soit conçu pour contribuer à la prise en charge des plaies, WIMBA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la cicatrisation ou au résultat final d'une plaie. Le succès du traitement dépend de différents facteurs, notamment de la bonne

application du produit, de l'état de santé du patient et d'une prise en charge vétérinaire complète.

6. Conservez dans un endroit frais et sec. Évitez la lumière directe du soleil.
7. Ne laissez aucun adulte, enfant ou animal ingérer ce produit. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin ou un vétérinaire.



Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

- [instagram.com/wimba.vet](https://www.instagram.com/wimba.vet)
- [facebook.com/wimba.vet](https://www.facebook.com/wimba.vet)
- [linkedin.com/wimbavet](https://www.linkedin.com/company/wimbavet)
- [youtube/@wimba.vet](https://www.youtube.com/@wimba.vet)

Rejoignez notre groupe Facebook :

- [facebook.com/groups/wimbapets](https://www.facebook.com/groups/wimbapets)