

Manuale d'uso

 **WOUND CARE**



Indice

Indicazioni	2
Guida all'applicazione	2
Uso dei WIMBA Wound Care Sticks	4
Pulizia standard	4
Condizioni di conservazione	5
Temperature di utilizzo	5
Limitazioni e avvertenze importanti	5

Indicazioni

WIMBA Wound Care offre una soluzione creando una barriera traspirante e flessibile. Creando una distanza fisica tra la ferita e l'ambiente circostante, i dispositivi proteggono la zona dal contatto diretto con l'esterno, assorbendo e distribuendo al contempo la pressione su una superficie più ampia quando viene applicata una forza. Quando viene posizionato sopra una medicazione primaria, questo distanziatore migliora la termoregolazione, che influisce direttamente sui tempi di guarigione, in particolare in caso di infezione, essudato e suppurazione.


Esempi di utilizzo:

- ferite
- callosità
- piaghe
- sulle prominenze ossee per ridurre il rischio di lesioni da pressione

Guida all'applicazione

Selezionare la misura corretta:

Scegliere una misura del prodotto che circondi completamente la ferita o l'area interessata. Il dispositivo deve poggiare interamente sul tessuto sano circostante per scaricare efficacemente la pressione dalla zona.

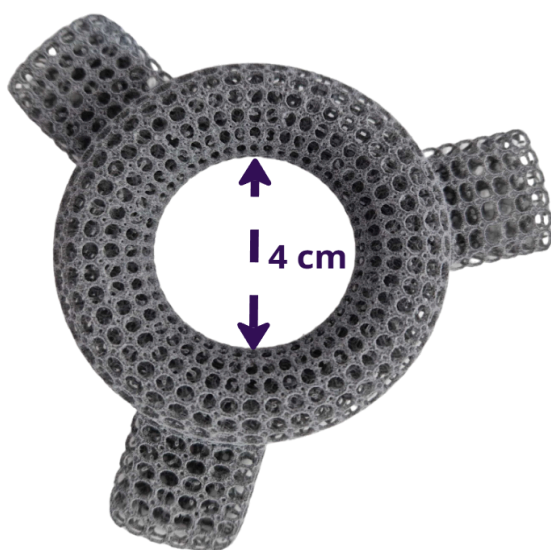

Preparare il sito della ferita:

Seguire i protocolli veterinari standard per la pulizia delle ferite. In presenza di una ferita aperta, un'ulcera o un sito chirurgico, applicare prima una medicazione primaria adeguata (ad es. una medicazione sterile non aderente o una garza) direttamente sul letto della ferita.


Posizionare il prodotto:

Posizionare il prodotto sull'area preparata, assicurandosi che la ferita e la medicazione primaria siano perfettamente centrate nell'apertura del prodotto. Il prodotto non deve entrare in contatto diretto con la ferita aperta.

Da ricordare!

Il prodotto non deve entrare in contatto diretto con la ferita aperta.

Uso dei WIMBA Wound Care Sticks

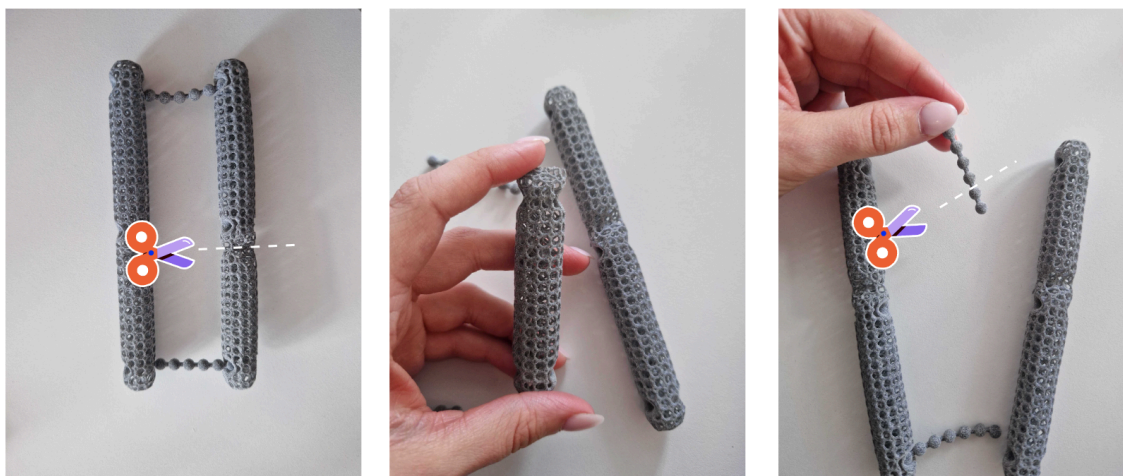

1. Gli elementi principali possono essere rifilati nel punto più stretto.
2. Il cordoncino di collegamento è un elemento separato e può essere accorciato per le ferite più strette.

Pulizia standard

- Il prodotto può essere pulito manualmente con acqua tiepida e sapone chirurgico oppure con un sapone delicato a pH neutro.
- Utilizzare un panno morbido o una spugna per pulire delicatamente la superficie, evitando materiali abrasivi.
- Risciacquare accuratamente con acqua pulita per eliminare ogni residuo di sapone.
- Lasciare asciugare completamente il prodotto all'aria in un'area ben ventilata prima di riporlo o riutilizzarlo.

Da ricordare!

Per motivi igienici, il prodotto può essere utilizzato fino a 5 volte su un singolo paziente. Lavare il prodotto tra un'applicazione e l'altra.

Condizioni di conservazione

- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
- Proteggere dalla luce solare diretta e dall'umidità.
- Prima di riporto, assicurarsi che il prodotto sia completamente pulito e asciutto per prevenire la proliferazione microbica.

Temperature di utilizzo

- Per garantire la funzionalità ottimale del prodotto, si consiglia di utilizzarlo nell'intervallo di temperatura da 5 °C a 40 °C (da 41 °F a 104 °F).
- L'esposizione prolungata a temperature al di fuori di questo intervallo può influire negativamente sulle prestazioni e sull'integrità strutturale del prodotto.

Limitazioni e avvertenze importanti

Il mancato rispetto di queste avvertenze può causare danni al prodotto, il malfunzionamento del dispositivo o lesioni al paziente.

-  **ATTENZIONE:** Sensibilità chimica. Non esporre questo prodotto a sostanze chimiche aggressive o corrosive. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, solventi (ad es. acetone), acidi forti, alcali e detergenti abrasivi. L'uso di tali sostanze può compromettere l'integrità strutturale del prodotto e causare il degrado del materiale.
-  **ATTENZIONE:** Sensibilità termica. Non esporre il prodotto a temperature superiori a 122 °F (50 °C). Le alte temperature possono causare deformazioni permanenti, alterando la forma e le prestazioni del prodotto.
 - NON STERILIZZARE QUESTO PRODOTTO IN AUTOCLAVE.
 - Non utilizzare vapore, metodi di sterilizzazione a caldo o lavastoviglie.



LEGGERE PRIMA DELL'USO:

1. Questo prodotto è destinato all'uso da parte di un medico veterinario abilitato o su sua prescrizione. Seguire sempre le istruzioni per l'uso fornite e i protocolli clinici stabiliti per la gestione delle ferite.
2. Solo per uso esterno. Non deve essere utilizzato internamente, impiantato o collocato all'interno di cavità corporee o in siti chirurgici profondi. Il distanziatore non è progettato per entrare in contatto diretto con una ferita aperta. Per evitare contaminazione, irritazione o interferenze con il processo di guarigione, non lasciare che il distanziatore entri in contatto diretto con il letto della ferita aperta.
3. Interrompere immediatamente l'uso se compaiono segni di irritazione cutanea, reazione allergica, infezione o altri effetti avversi in corrispondenza o in prossimità del sito di applicazione.
4. La stabilità e il corretto posizionamento di questo prodotto dipendono in modo determinante da tecniche di bendaggio corrette e sicure. Il prodotto può spostarsi, soprattutto sotto il peso dell'animale o a causa dei suoi movimenti, e ciò non è considerato un difetto del prodotto. La persona che applica il dispositivo è l'unica responsabile del suo corretto fissaggio. Controllare regolarmente il bendaggio e il sito della ferita per verificare che il prodotto rimanga nella posizione prevista.
5. Sebbene questo prodotto sia progettato per agevolare la gestione delle ferite, WIMBA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alla guarigione o all'esito finale di una ferita. Il successo del trattamento dipende da diversi fattori, tra cui la corretta applicazione, lo stato di salute del paziente e un'assistenza veterinaria completa.
6. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Evitare la luce solare diretta.

7. Non consentire ad adulti, bambini o animali di ingerire questo prodotto. In caso di ingestione accidentale, richiedere immediatamente assistenza medica o veterinaria.



Seguici sui social media:

- [instagram.com/wimba.vet](https://www.instagram.com/wimba.vet)
- [facebook.com/wimba.vet](https://www.facebook.com/wimba.vet)
- [linkedin.com/wimbavet](https://www.linkedin.com/company/wimbavet)
- [youtube/@wimba.vet](https://www.youtube.com/@wimba.vet)

Unisciti al nostro gruppo Facebook:

- [facebook.com/groups/wimbapets](https://www.facebook.com/groups/wimbapets)