

Instrukcja Obsługi

 **WOUND CARE**





PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM:

1. Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez lub na zlecenie licencjonowanego lekarza weterynarii. Zawsze postępuj zgodnie z dołączoną Instrukcją Użycia oraz wszelkimi ustalonymi protokołami klinicznymi dotyczącymi leczenia ran.
2. Nie wolno używać produktu wewnątrznie, wszczepiać go ani umieszczać w żadnej jamie ciała czy miejscu operacyjnym. Opatrunek nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z otwartą raną. Aby zapobiec zanieczyszczeniu, podrażnieniom lub zakłóceniu procesu gojenia, nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu Wound Care z otwartą raną.
3. Natychmiast przerwij stosowanie i skonsultuj się z weterynarzem, jeśli w miejscu aplikacji lub w jego pobliżu wystąpią jakiegokolwiek oznaki podrażnienia skóry, reakcji alergicznej, infekcji lub innych niepożądanych efektów.
4. Stabilność i prawidłowe umiejscowienie tego produktu są krytycznie zależne od poprawnych i pewnych technik bandażowania. Przesunięcie lub przemieszczenie produktu może nastąpić, zwłaszcza pod ciężarem zwierzęcia lub z powodu jego ruchu, i nie jest to uważane za wadę produktu. Osoba nakładająca opatrunek jest wyłącznie odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia. Regularnie monitoruj opatrunek i miejsce rany, aby potwierdzić, że produkt pozostaje w zamierzonym położeniu.
5. Chociaż ten produkt został zaprojektowany, aby wspomagać leczenie ran, firma WIMBA nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, dotyczących gojenia ani ostatecznego wyniku leczenia jakiegokolwiek rany. Sukces leczenia zależy od wielu czynników, w tym od prawidłowego zastosowania, stanu zdrowia pacjenta i kompleksowej opieki weterynaryjnej.
6. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
7. Nie pozwalaj dorosłym, dzieciom ani zwierzętom na spożycie tego produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia natychmiast zasięgnij pomocy medycznej lub weterynaryjnej.
8. Informacje zawarte w tej instrukcji mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowią substytutu profesjonalnej porady medycznej, diagnozy czy leczenia weterynaryjnego. W przypadku pytań dotyczących stanu zdrowia zawsze zasięgnij porady wykwalifikowanego lekarza weterynarii.



Spis treści

Wskazania.....	3
Przewodnik po zastosowaniu.....	3
Dostosowywanie WIMBA Sticks.....	5
Standardowe czyszczenie.....	5
Warunki przechowywania.....	6
Temperatury użytkowania.....	6
Ważne ograniczenia i ostrzeżenia.....	6

Wskazania

WIMBA Wound Care oferuje rozwiązanie w postaci oddychającej, elastycznej bariery. Otaczając ranę, tworzą fizyczny dystans między raną a otoczeniem i chronią to miejsce przed bezpośrednim kontaktem zewnętrznym, jednocześnie absorbując i rozprowadzając nacisk na większą powierzchnię w momencie przykładania siły. Nałożony na podstawowy opatrunek, WIMBA Wound Care poprawia termoregulację, co bezpośrednio wpływa na czas gojenia, szczególnie w przypadku infekcji, wysięku i ropy.


Przykłady zastosowania:

- rany
- modzele
- odleżyny
- na wystających kościach, by zmniejszyć ryzyko powstania odleżyn

Przewodnik po zastosowaniu

Wybierz odpowiedni rozmiar:

Należy wybrać rozmiar produktu, który całkowicie otacza ranę lub dotknięty obszar. Opatrunek powinno opierać się w całości na zdrowej tkance, aby skutecznie odciążyć miejsce urazu.

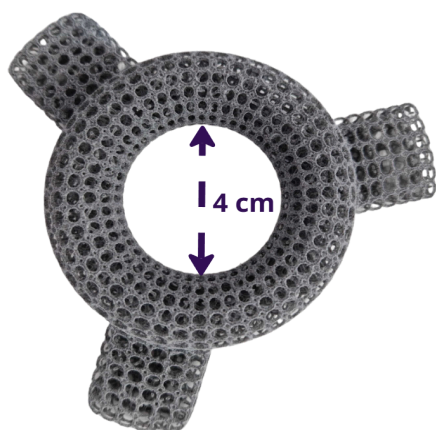

Przygotowanie miejsca rany:

Postępuj zgodnie ze standardowymi weterynaryjnymi protokołami oczyszczania rany. W przypadku otwartej rany, owrzodzenia lub miejsca po zabiegu chirurgicznym, najpierw nałóż odpowiedni opatrunek pierwotny (np. sterylny, nieprzywierający wkład, gazę) bezpośrednio na dno rany.


Umieszczenie produktu

Umieść produkt nad przygotowanym obszarem, upewniając się, że rana i jej opatrunek pierwotny są idealnie wyśrodkowane w otworze produktu. Sam produkt nie może mieć bezpośredniego kontaktu z otwartą raną.

Pamiętaj!

Samo urządzenie nie może mieć bezpośredniego kontaktu z otwartą raną.

Dostosowywanie WIMBA Sticks

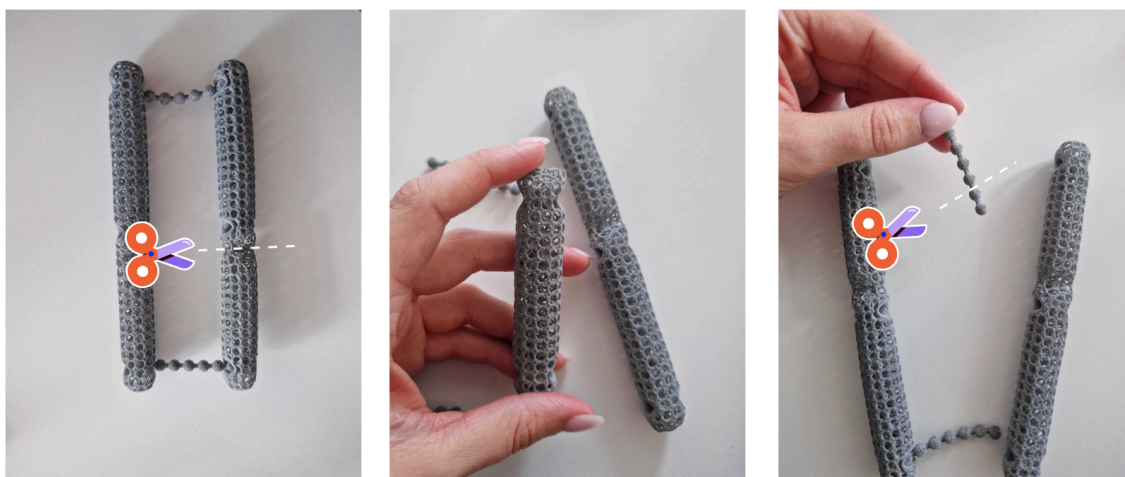

1. Główne elementy można przyciąć w największym miejscu.
2. Sznurek łączący jest osobnym elementem i może być skrócony dla węższych ran.

Standardowe czyszczenie

- Produkt można czyścić ręcznie, używając letniej wody i mydła chirurgicznego bądź łagodnego mydła o neutralnym pH.
- Używaj miękkiej ściereczki lub gąbki do delikatnego mycia powierzchni, unikając materiałów ściernych.
- Dokładnie spłucz czystą wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości mydła.
- Pozostaw produkt do całkowitego wyschnięcia na powietrzu w dobrze wentylowanym miejscu przed ponownym użyciem lub schowaniem.

Pamiętaj!

Ze względów higienicznych produkt można używać maksymalnie 5 razy u jednego pacjenta. Pamiętaj, aby po każdym użyciu produkt umyć.

Warunki przechowywania

- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu.
- Chron przed bezpośrednim światłem słonecznym i źródłami wilgoci.
- Upewnij się, że produkt jest całkowicie czysty i suchy przed schowaniem, aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów.

Temperatury użytkowania

- Aby zapewnić optymalne działanie produktu, zaleca się używanie go w zakresie temperatur od 5°C do 40°C (41°F do 104°F).
- Długotrwałe wystawienie na temperatury poza tym zakresem może negatywnie wpłynąć na wydajność i integralność strukturalną produktu.

Ważne ograniczenia i ostrzeżenia

- Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie produktu lub szkodę dla pacjenta.
-  **UWAGA:** Wrażliwość na chemikalia; Nie wystawiaj tego produktu na działanie agresywnych lub żrących chemikaliów. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do, rozpuszczalników (np. acetonu), silnych kwasów, zasad i ściernych środków czyszczących. Użycie takich środków może naruszyć integralność strukturalną produktu i prowadzić do degradacji materiału.
-  **UWAGA:** Wrażliwość na temperaturę; Nie wystawiaj produktu na temperatury przekraczające 50°C (122°F). Wysokie temperatury mogą spowodować trwałe odkształcenie, zmieniając kształt i wydajność produktu.
 - NIE WYKONUJ STERYLIZACJI AUTOKLAWEM
 - Nie myj w zmywarce



Śledź nas w mediach społecznościowych:

→ [instagram.com/wimba.vet](https://www.instagram.com/wimba.vet)
→ [facebook.com/wimba.vet](https://www.facebook.com/wimba.vet)
→ [linkedin.com/wimbavet](https://www.linkedin.com/company/wimbavet)
→ [youtube/@wimba.vet](https://www.youtube.com/channel/UCwimba.vet)